



Электронные весы
Стр. 1238-1248



Электронные весы для
измерения плотности
Стр. 1249-1250



Анализаторы влажности
Стр. 1252



Весы для взвешивания
Стр. 1253-1254



Электронные карманные
весы
Стр. 1255



Платформенные весы
Стр. 1256



Платформенные весы
Стр. 1257



Напольные весы
Стр. 1258



Вилочный погрузчик
с весами
Стр. 1259



Электронные крановые
весы
Стр. 1260-1266



Грузы
Стр. 1267-1270



Резак гнкм
Стр. 1270



ВИДЕО

ВЫВОД
ДАННЫХ

ЭЛЕКТРОННЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЕСЫ




8310-320A

калибровочный груз
(включен в 8310-120M,
8310-210M и 8310-320M)

принтер (опция)

Ед. изм.: мм

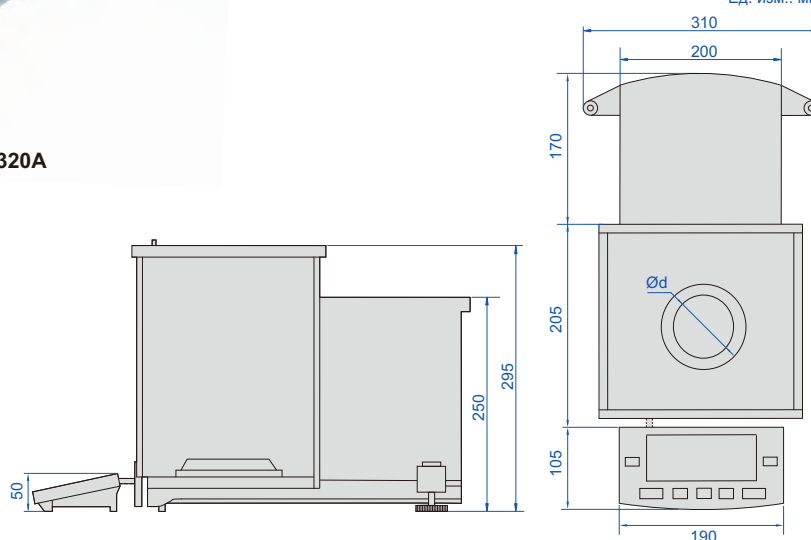

- Электромагнитный датчик
- Разделенные блоки дисплея и весов для уменьшения вибрационной погрешности
- Технология цифровой обработки улучшает стабильность показаний и скорость отклика для добавление микрообразцов, вес образца и показания весов стабильны
- Ед. изм: г, карат, унция, фунт
- Взвешивание, подсчет, тарировка, процент
- Вывод данных

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	8310-120M	8310-210M	8310-320M	8310-120A	8310-210A	8310-320A
Калибровка	внешняя калибровка			внутренняя калибровка		
Максимальное взвешивание	120 г	210 г	320 г	120 г	210 г	320 г
Минимальное взвешивание	10 мг	10 мг	10 мг	10 мг	10 мг	10 мг
Разрешение (d)	0.1 мг	0.1 мг	0.1 мг	0.1 мг	0.1 мг	0.1 мг
Межповерочный интервал (e)	1 мг	1 мг	1 мг	1 мг	1 мг	1 мг
Точность (m - нагрузка)	m≤50 г: ±0.5 мг; 50 г<m≤200 г: ±1 мг; m>200 г: ±1.5 мг					
Повторяемость	±0.1 мг					
Линейность	±0.2 мг					
Время стабилизации	2.5 с					
Размер лотка для взвешивания (Ød)	Ø90 мм					
Выход	RS232					
Рабочая температура	10~30°C					
Рабочая влажность	20~85% RH					
Источник питания	адаптер питания (12 В/2А)					
Размеры (L×W×H)	480×310×320 мм					
Масса	6 кг					

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


Кабель RS232	8304-CABLE *
Принтер	8303-PRINTER

* Используется для подключения к компьютеру

ЭЛЕКТРОННЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЕСЫ (БАЗОВЫЙ ТИП)

ВЫВОД
ДАННЫХ

37

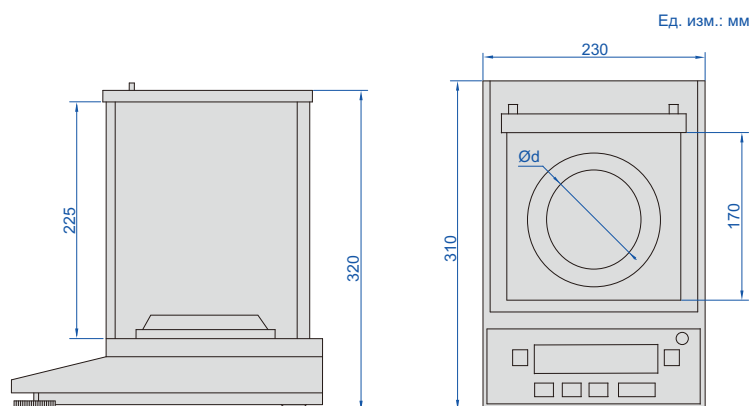

8304-120

- Электромагнитный датчик, монтируемый вниз
- Взвешивание, подсчет, тарировка, процентное соотношение
- ЖК-дисплей, с подсветкой
- Вывод данных
- Ед. изм.: г, карат, унция, фунт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	8304-120	8304-220
Максимальное взвешивание	120 г	220 г
Минимальное взвешивание	10 мг	10 мг
Разрешение (d)	0.1 мг	0.1 мг
Межповерочный интервал (e)	1 мг	1 мг
Точность (m - нагрузка)	m ≤ 50 г: ±0.5 мг; 50 г < m ≤ 120 г: ±1 мг	m ≤ 50 г: ±0.5 мг; 50 г < m ≤ 200 г: ±1 мг; m > 200 г: ±1.5 мг
Повторяемость	±0.2 мг	
Линейность	±0.2 мг	
Время стабилизации	2.5 с	
Выход	RS232	
Размер лотка для взвешивания (Ød)	Ø90 мм	
Рабочая температура	10~30°C	
Рабочая влажность	20~85% RH	
Источник питания	адаптер питания (12 В/2А)	
Размеры (L×W×H)	230×310×320 мм	



калибровочный груз
(в комплекте)



принтер (опция)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


Кабель RS232	8304-CABLE *
Принтер	8303-PRINTER
Кабель для вывода данных (формат клавиатуры)	7302-8304 стр. 23

* Используется для подключения к компьютеру

ВЫВОД
ДАННЫХ

ПРЕЦИЗИОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ

37

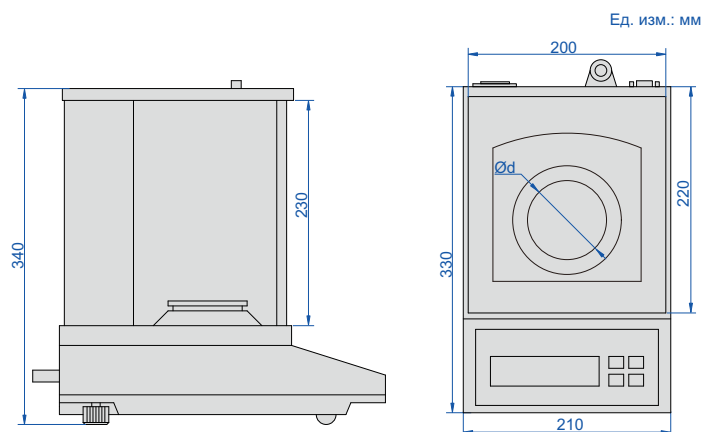

8303-520

- Корпус из алюминиевого сплава, ветрозащитный экран, три боковые стеклянные раздвижные двери
- Электромагнитный датчик баланса
- Ед. изм.: г, карат, тройская унция, унция, гран, пеннивейт, мг
- Взвешивание, подсчет, тарировка
- Вывод данных
- С крюком внизу



калибровочный груз
класса F1 (в комплекте)



принтер (опция)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	8303-220	8303-320	8303-520	8303-620	8303-1020	8303-1520	8303-2020
Максимальное взвешивание	220 г	320 г	520 г	620 г	1020 г	1520 г	2020 г
Минимальное взвешивание	20 мг	20 мг	100 мг	100 мг	100 мг	100 мг	100 мг
Разрешение (d)	1 мг	1 мг	1 мг	1 мг	1 мг	1 мг	1 мг
Межповерочный интервал (e)	10 мг	10 мг	10 мг	10 мг	10 мг	10 мг	10 мг
Точность (m - нагрузка)	m≤50 г: ±5 мг; 50 г<m≤200 г: ±10 мг; m>200 г: ±15 мг		m≤500 г: ±5 мг; m>500 г: ±10 мг				m≤500 г: ±5 мг 500 г<m≤2000 г: ±10 мг m>2000 г: ±15 мг
Размер лотка для взвешивания (Ød)	Ø80 мм				Ø120 мм		
Рабочая температура	15~30°C		18~23°C				
Рабочая влажность	40%~80% RH		50%~70% RH				
Источник питания	220 В, 50/60 Гц						
Размеры (L×W×H)	330×210×340 мм						

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Кабель RS232	8301-CABLE*
Принтер	8303-PRINTER
Кабель для вывода данных (формат клавиатуры)	7302-8001 стр. 23
Беспроводной передатчик (необходим приемник сигнала)	7315-8301 стр. 8

* Используется для подключения к компьютеру

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ ВЕСЫ

ВЫВОД
ДАННЫХ

СЕНСОРНЫЙ
ЭКРАН

ВНУТРЕННИЙ
КАЛИБРОВКА


37




калибровочный груз
класса F1 (в комплекте)



принтер (опция)

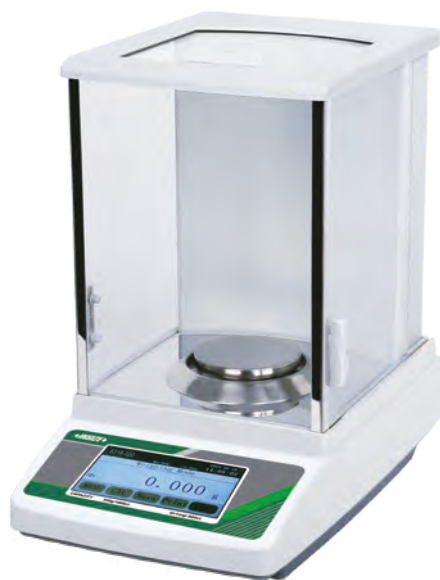

8319-320

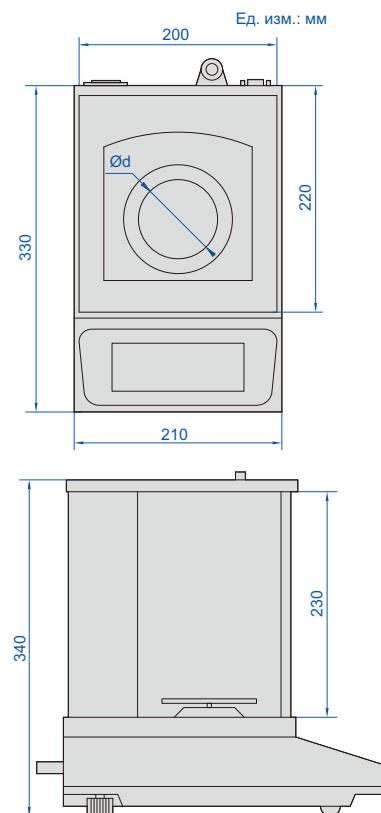

- Встроенные калибровочные гири, автоматическая внутренняя калибровка
- Большой сенсорный дисплей
- Взвешивание, подсчет, тарирование, отображение процентного содержания, определение плотности
- Корпус из алюминиевого сплава, ветрозащитный экран, три боковые стеклянные раздвижные двери
- Единицы измерения: г, кг, оцт, унция, гн, двт, мг
- Электромагнитный сбалансированный датчик
- С крюком в нижней части
- Выход данных

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	8319-220	8319-320	8319-520	8319-620	8319-1020	8319-1520
Максимальное взвешивание	220 г	320 г	520 г	620 г	1020 г	1520 г
Минимальное взвешивание	20 мг	20 мг	100 мг	100 мг	100 мг	100 мг
Разрешение (d)	1 мг	1 мг	1 мг	1 мг	1 мг	1 мг
Межповерочный интервал (e)	10 мг	10 мг	10 мг	10 мг	10 мг	10 мг
Точность (m - нагрузка)	m≤50 г: ±5 мг 50 г<m≤200 г: ±10 мг m>200 г: ±15 мг		m≤500 г: ±5 мг; m>500 г: ±10 мг			
Размер лотка для взвешивания (Ød)	Ø80 мм				Ø120 мм	
Рабочая температура	15~30°C		18~23°C			
Рабочая влажность	40%~80% RH		50%~70% RH			
Источник питания	220 В, 50/60 Гц					
Размеры (L×W×H)	330×210×340 мм					

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

Основной блок	1 шт
Калибровочный груз	1 шт

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Кабель RS232	8301-CABLE*
Принтер	8303-PRINTER
Кабель для вывода данных (формат клавиатуры)	7302-8001 стр. 23
Беспроводной передатчик (необходим приемник сигнала)	7315-8301 стр. 8

*Используется для подключения к компьютеру

Вывод данных

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ

37



ветрозащитный щиток
(включен в 8301-300,
8301-600 и 8301-1200)




калибровочный груз
(включен в 8301-300,
8301-600 и 8301-1200)



8301-3000

- Автоматическое обнуление при включении питания
- Ед. изм: г (грамм), карат (карат), тройская унция (тройская унция)
- Взвешивание, подсчет, тарировка
- Сигнализация перегрузки
- Вывод данных

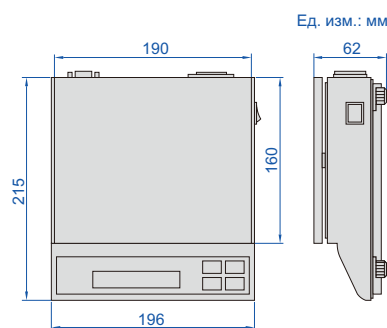

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	8301-300	8301-600	8301-1200	8301-3000	8301-6000
Максимальное взвешивание	300 г	600 г	1200 г	3000 г	6000 г
Минимальное взвешивание	0.2 г	0.2 г	0.2 г	2 г	2 г
Разрешение (d)	0.01 г	0.01 г	0.01 г	0.1 г	0.1 г
Межповерочный интервал (e)	0.1 г	0.1 г	0.1 г	1 г	1 г
Точность (m - нагрузка)	m≤50 г: ±0.05 г; 50 г<m≤200 г: ±0.1 г; m>200 г: ±0.15 г		m≤500 г: ±0.05 г; m>500 г: ±0.1 г	m≤500 г: ±0.5 г; 500 г<m≤2000 г: ±1 г; m>2000 г: ±1.5 г	
Размер лотка для взвешивания	Ø135 мм			190×160 мм	
Рабочая температура	0~40°C				
Рабочая влажность	≤80% RH				
Источник питания	220 В, 50/60 Гц				
Размеры (L×W×H)	215×196×62 мм				

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Кабель RS232	8301-CABLE*
Кабель для вывода данных (формат клавиатуры)	7302-8001 стр. 23
Беспроводной передатчик (необходим приемник сигнала)	7315-8301 стр. 8

* Используется для подключения к компьютеру

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ (СТАНДАРТНЫЙ ТИП)

ВЫВОД
ДАННЫХ



37



8305-5000




калибровочный груз
(включен в 8305-2000
и 8305-3000)

- ЖК-дисплей с подсветкой
- Ед. изм.: г, карат, тройская унция, унция, гран, пеннивейт, мг, фунт, кг
- Взвешивание, подсчет, тарировка
- С крючком в нижней части
- Вывод данных



принтер (опция)

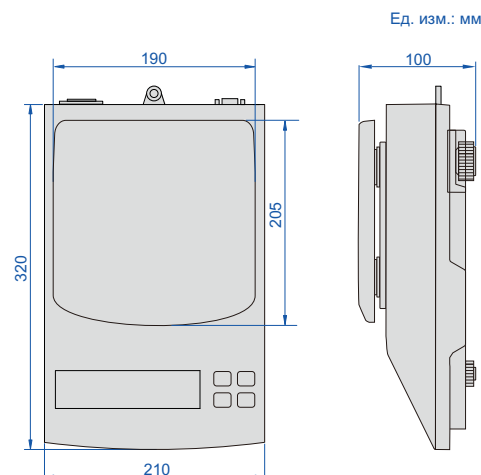

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	8305-2000	8305-3000	8305-5000	8305-6000
Максимальное взвешивание	2 кг	3 кг	5 кг	6 кг
Минимальное взвешивание	0.5 г	0.5 г	0.5 г	0.5 г
Разрешение (d)	0.01 г	0.01 г	0.01 г	0.01 г
Межповерочный интервал (e)	0.1 г	0.1 г	0.1 г	0.1 г
Точность (m - нагрузка)	m≤0.5 кг: ±0.05 г; 0.5 кг<m≤2 кг: ±0.1 г	m≤0.5 кг: ±0.05 г; 0.5 кг<m≤2 кг: ±0.1 г m>2 кг: ±0.15 г	m≤0.5 кг: ±0.05 г; 0.5 кг<m≤2 кг: ±0.1 г m>2 кг: ±0.15 г	m≤0.5 кг: ±0.05 г; 0.5 кг<m≤2 кг: ±0.1 г m>2 кг: ±0.15 г
Размер лотка для взвешивания	190×205 мм			
Выход	RS232			
Рабочая температура	0~40°C			
Рабочая влажность	≤80% RH			
Источник питания	220 В, 50/60 Гц			
Размеры (L×W×H)	320×210×100 мм			

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Кабель RS232	8301-CABLE*
Принтер	8303-PRINTER
Кабель для вывода данных (формат клавиатуры)	7302-8001 стр. 23
Беспроводной передатчик (необходим приемник сигнала)	7315-8301 стр. 8

* Используется для подключения к компьютеру

ПОПУЛЯРНАЯ
МОДЕЛЬ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ (БАЗОВЫЙ ТИП)




принтер (опция)

- Двойная весовая кастрюля из нержавеющей стали и пластика
- Взвешивание, простой подсчет, тарирование
- Датчик тензометрических весов
- ЖК-дисплей с подсветкой
- Единицы измерения: г, фунт, кг, унция
- Сигнализация перегрузки



8306-20AD

Ед. изм.: мм

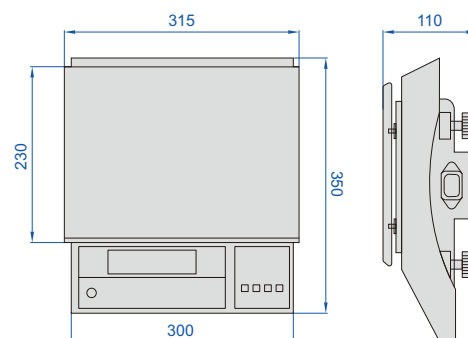

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая температура	-10~40°C
Рабочая влажность	≤85% RH
Размер поддона	315×230 мм
Источник питания	перезаряжаемая свинцово-кислотная батарея (6 В/4 Ач)
Стабильное время чтения	≤2 с

Код	Максимальное взвешивание	Разрешение (d)	Минимальное взвешивание	Межповерочный интервал (e)	Количество верификаций интервал (n)	Точность (m - нагрузка)	Выход
8306-10	10 кг	1 г	20 г	10 г	1000	m≤5 кг: ±5 г; m>5 кг: ±10 г	нет
8306-15	15 кг	1 г	20 г	10 г	1500	m≤5 кг: ±5 г; m>5 кг: ±10 г	
8306-20	20 кг	1 г	20 г	10 г	2000	m≤5 кг: ±5 г; m>5 кг: ±10 г	
8306-30	30 кг	1 г	20 г	10 г	3000	m≤5 кг: ±5 г; 5 кг<m≤20 кг: ±10 г; m>20 кг: ±15 г	
8306-5A	5 кг	0.1 г	5 г	1 г	5000	±0.5 г	
8306-10A	10 кг	0.1 г	5 г	1 г	10000	m≤5 кг: ±0.5 г; m>5 кг: ±1 г	
8306-15A	15 кг	0.1 г	5 г	1 г	15000	m≤5 кг: ±0.5 г; m>5 кг: ±1 г	
8306-20A	20 кг	0.1 г	5 г	1 г	20000	m≤5 кг: ±0.5 г; m>5 кг: ±1 г	RS232
8306-10D	10 кг	1 г	20 г	10 г	1000	m≤5 кг: ±5 г; m>5 кг: ±10 г	
8306-15D	15 кг	1 г	20 г	10 г	1500	m≤5 кг: ±5 г; m>5 кг: ±10 г	
8306-20D	20 кг	1 г	20 г	10 г	2000	m≤5 кг: ±5 г; m>5 кг: ±10 г	
8306-30D	30 кг	1 г	20 г	10 г	3000	m≤5 кг: ±5 г; 5 кг<m≤20 кг: ±10 г; m>20 кг: ±15 г	
8306-5AD	5 кг	0.1 г	5 г	1 г	5000	±0.5 г	
8306-10AD	10 кг	0.1 г	5 г	1 г	10000	m≤5 кг: ±0.5 г; m>5 кг: ±1 г	
8306-15AD	15 кг	0.1 г	5 г	1 г	15000	m≤5 кг: ±0.5 г; m>5 кг: ±1 г	
8306-20AD	20 кг	0.1 г	5 г	1 г	20000	m≤5 кг: ±0.5 г; m>5 кг: ±1 г	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Кабель RS232	8306-CABLE *
Принтер	8306-PRINTER

* Используется для подключения к компьютеру

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ

ВЫВОД
ДАННЫХ

37



сигнальная лампа (опция)



принтер (опция)




8307-15K

- Установка нуля, взвешивание, подсчет, проверка сигнала тревоги
- Вычитание значения тары, накопление, отображение в процентах
- Сигнализация перегрузки
- ЖК-дисплей с подсветкой
- Автоматическое отключение питания
- Вывод данных
- Единицы измерения: кг, фунт, г, унция, т (ола)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая температура	-10~40°C
Рабочая влажность	30%~80% RH
Размер поддона	300×225 мм
Источник питания	перезаряжаемая свинцово-кислотная батарея (6 В/4 Ач)
Выход	RS232

Ед. изм.: мм

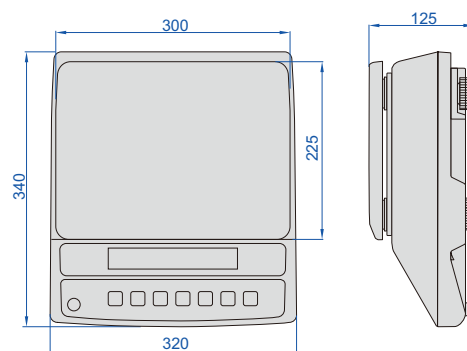

Код	Максимальное взвешивание	Разрешение (d)	Минимальное взвешивание	Межповерочный интервал (e)	Количество верификаций интервал (n)	Точность (m - нагрузка)
8307-6K	6 кг	0.05 г	2.5 г	0.1 г	60000	m≤500 г: ±0.05 г; 500 г<m≤2 кг: ±0.1 г; m>2 кг: ±0.15 г
8307-15K	15 кг	0.1 г	5 г	1 г	15000	m≤5 кг: ±0.5 г; m>5 кг: ±1 г
8307-30K	30 кг	0.2 г	10 г	1 г	30000	m≤5 кг: ±0.5 г; 5 кг<m≤20 кг: ±1 г; m>20 кг: ±1.5 г
8307-3КА	3 кг	0.05 г	2.5 г	0.1 г	30000	m≤500 г: ±0.05 г; 500 г<m≤2 кг: ±0.1 г; m>2 кг: ±0.15 г
8307-6КА	6 кг	0.1 г	5 г	1 г	6000	m≤5 кг: ±0.5 г; m>5 кг: ±1 г
8307-15КА	15 кг	0.2 г	10 г	1 г	15000	m≤5 кг: ±0.5 г; m>5 кг: ±1 г
8307-30КА	30 кг	0.5 г	25 г	1 г	30000	m≤5 кг: ±0.5 г; 5 кг<m≤20 кг: ±1 г; m>20 кг: ±1.5 г
8307-3КВ	3 кг	0.1 г	2 г	1 г	3000	m≤500 г: ±0.5 г; 500 г<m≤2 кг: ±1 г; m>2 кг: ±1.5 г
8307-6КВ	6 кг	0.2 г	10 г	1 г	6000	m≤5 кг: ±0.5 г; m>5 кг: ±1 г
8307-15КВ	15 кг	0.5 г	25 г	1 г	15000	m≤5 кг: ±0.5 г; m>5 кг: ±1 г
8307-30КВ	30 кг	1 г	20 г	10 г	3000	m≤5 кг: ±5 г; 5 кг<m≤20 кг: ±10 г; m>20 кг: ±15 г

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Сигнальная лампа	8001-ALARM
Принтер	8001-PRINTER
Кабель для вывода данных (формат клавиатуры)	7302-8001 стр. 23
Беспроводной передатчик (необходим приемник сигнала)	7315-8001 стр. 8

ВЫВОД
ДАННЫХ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ

- Весы из нержавеющей стали и пластика
- Автоматическая калибровка, отслеживание нуля, взвешивание, подсчет, тарирование
- Основание из алюминиевого сплава
- Тензометрические весы
- Выход данных
- Единицы измерения: кг, фунт



8308-30KB


Ед. изм.: мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая температура	0~40°C
Рабочая влажность	≤80% RH
Размер поддона	300×224 мм
Источник питания	перезаряжаемая свинцово-кислотная батарея (6 В/4 Ач)
Выход	RS232



принтер (опция)

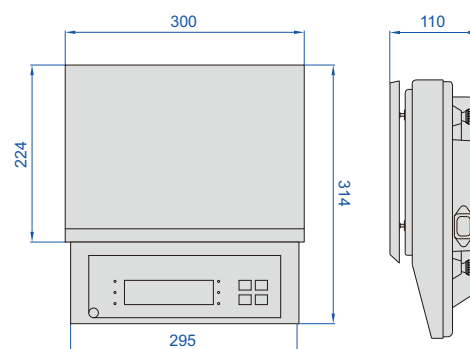

Код	Максимальное взвешивание	Разрешение (d)	Минимальное взвешивание	Межповерочный интервал (e)	Количество верификаций интервал (n)	Точность (m - нагрузка)
8308-3K	3 кг	0.1 г	2 г	1 г	3000	m≤500 г: ±0.5 г; 500 г<m≤2 кг: ±1 г; m>2 кг: ±1.5 г
8308-6K	6 кг	0.1 г	2 г	1 г	6000	m≤500 г: ±0.5 г; 500 г<m≤2 кг: ±1 г; m>2 кг: ±1.5 г
8308-10K	10 кг	1 г	20 г	10 г	1000	m≤5 кг: ±5 г; m>5 кг: ±10 г
8308-15K	15 кг	0.5 г	25 г	1 г	15000	m≤5 кг: ±0.5 г; m>5 кг: ±1 г
8308-20K	20 кг	1 г	20 г	10 г	2000	m≤5 кг: ±5 г; m>5 кг: ±10 г
8308-30K	30 кг	1 г	20 г	10 г	3000	m≤5 кг: ±5 г; 5 кг<m≤20 кг: ±10 г; m>20 кг: ±15 г
8308-3KA	3 кг	0.5 г	10 г	1 г	3000	m≤500 г: ±0.5 г; 500 г<m≤2 кг: ±1 г; m>2 кг: ±1.5 г
8308-6KA	6 кг	0.5 г	10 г	1 г	6000	m≤500 г: ±0.5 г; 500 г<m≤2 кг: ±1 г; m>2 кг: ±1.5 г
8308-15KA	15 кг	1 г	20 г	10 г	1500	m≤5 кг: ±5 г; m>5 кг: ±10 г
8308-30KA	30 кг	5 г	100 г	10 г	3000	m≤5 кг: ±5 г; 5 кг<m≤20 кг: ±10 г; m>20 кг: ±15 г
8308-10KB	10 кг	0.1 г	5 г	1 г	10000	m≤5 кг: ±0.5 г; m>5 кг: ±1 г
8308-20KB	20 кг	0.1 г	5 г	1 г	15000	m≤5 кг: ±0.5 г; m>5 кг: ±1 г
8308-30KB	30 кг	0.1 г	5 г	1 г	30000	m≤5 кг: ±0.5 г; 5 кг<m≤20 кг: ±1 г; m>20 кг: ±1.5 г

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Кабель RS232	8301-CABLE*
Принтер	8303-PRINTER
Кабель для вывода данных (формат клавиатуры)	7302-8001 стр. 23
Беспроводной передатчик (необходим приемник сигнала)	7315-8301 стр. 8

*Используется для подключения к компьютеру

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ (ПРОДВИНУТЫЙ ТИП)

МОЖЕТ БЫТЬ
НАСТРОЕН


СЕНСОРНЫЙ
ЭКРАН

ВЫСОКИЙ
ТОЧНОСТЬ

ВЫВОД
ДАННЫХ



8309-35

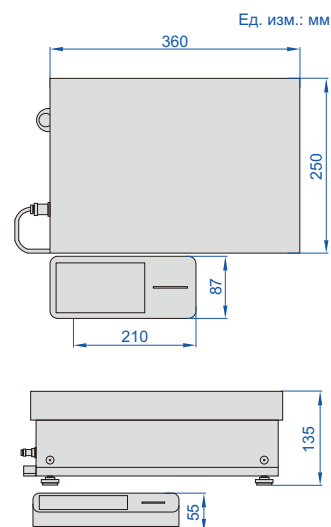

- Электромагнитный сбалансированный датчик
- Компенсирует стабильность нуля и точность взвешивания за счет точной загрузки при нескольких температурных точках
- Весовой поддон из нержавеющей стали, устойчивый к воздействию кислот и коррозии
- Ручное отключение экрана, экранная заставка
- Взвешивание, подсчет, тарирование
- Сигнализация перегрузки
- Единицы измерения: г, кг, фунт, т, унция
- Защита паролем
- Вывод данных



принтер (опция)



зарядный блок (опция)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	8309-16	8309-20	8309-30	8309-35	8309-16A	8309-20A	8309-30A	8309-35A
Максимальное взвешивание	16 кг	20 кг	30 кг	35 кг	16 кг	20 кг	30 кг	35 кг
Разрешение (d)	0.1 г				0.05 г			
Межповерочный интервал (е)	1 г				0.1 г			
Точность	±0.1 г		±0.2 г		±0.05 г		±0.1 г	
Повторяемость	±0.1 г				±0.05 г			
Линейность	±0.1 г				±0.05 г			
Вес калибровки	10 кг		20 кг		10 кг		20 кг	
Метод калибровки	внешняя калибровка							
Минимальное взвешивание	5 г							
Время стабилизации	≤1.5 с							
Температура эксплуатации	10~30°C							
Влажность при эксплуатации	30%~80%RH							
Размер весового лотка	360×250 мм							
Источник питания	адаптер питания (5 В/12 А)							
Интерфейс данных	DB9, Type-C, RS485							
Протоколы связи	совместим с протоколами связи SBI (RS232) и SICS							

Продолжение следует

Продолжение предыдущей страницы

37



Измерительные функции:

Взвешивание Это приложение определяет вес взвешиваемого объекта взвешиваемого объекта в определенном диапазоне взвешивания устройства	Взвешивание Приложение может умножить значение взвешивания на настраиваемый коэффициент для получения преобразованного измерения, последний введенный коэффициент сохраняется при перерыве в подаче питания
Смешивание Приложение позволяет последовательно помещать в контейнер до 99 ингредиентов для смеси или рецепта. После каждого размещения ингредиента веса автоматически тарируют вес и могут отображать индивидуальный или общий вес ингредиентов	Животные взвешивание Применяется для взвешивания движущихся грузов (например, живых животных) и для взвешивания в нестабильных условиях, когда для каждого взвешиваемого объекта автоматически выполняется измерительный цикл с определенным количеством измерений, среднее значение определяется из отдельных и выводится на дисплей в виде результата
Статистика Приложение может сохранять до 99 значений взвешивания и вычисленных значений, а также выполнять статистические оценки	Проверка взвешивание Приложение проверяет, что значение взвешивания находится в пределах верхнего и нижнего пределов и определяет результат теста результат, позволяя взвешивать определенный номинальный вес
Компонент Приложение может суммировать до 99 значений взвешивания, взвешивать компоненты в разных контейнерах и тарировать каждый контейнер перед взвешиванием каждого компонента	Пик проведение Это приложение определяет максимальное значение взвешивания (пиковое значение) образца и отображает это значение в течение 5 секунд после разгрузки весов
Плотность Приложение может определять плотность твердых материалов на основе метода плавучести (плотность порошка не может быть проверена, компоненты для определения плотности не поставляются в стандартной комплектации)	Подсчет Приложение подсчитывает вес почти одинаковых изделий путем сравнивая их с эталонным образцом
Процент Это приложение позволяет определить процентное содержание или процентной разницы взвешиваемого объекта на основе эталонный вес	

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

Основной блок	1 шт
Кабель RS232 *	1 шт
Индикатор сенсорного экрана	1 шт

* Используется для подключения к компьютеру

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Принтер	8309-PRINTER
Зарядный блок	1155-5-POB

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ

ВЫВОД
ДАННЫХ

ВНУТРЕННЯЯ
КАЛИБРОВКА


СЕНСОРНЫЙ
ЭКРАН

аксессуары для плотности (в комплекте)



8102-320

Ед. изм.: мм

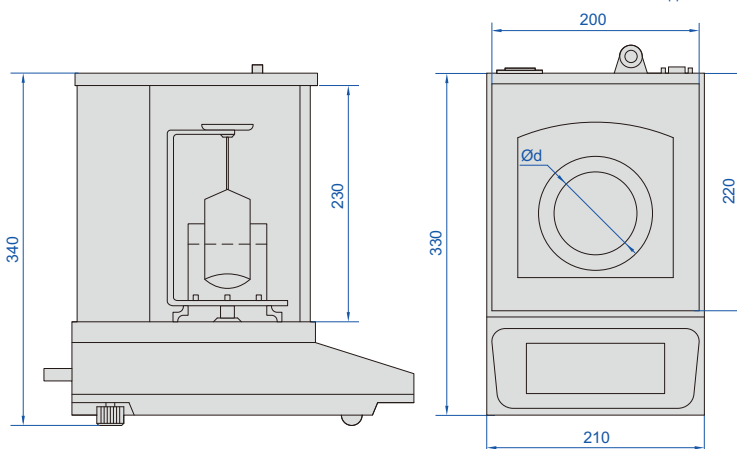

- Подходит для измерения плотности твердых веществ и жидкостей
- Корпус из алюминиевого сплава, ветрозащитный экран, три боковые стеклянные раздвижные дверцы, крюк в нижней части
- Взвешивание, подсчет, тарирование, процентный дисплей
- Встроенные калибровочные гири, автоматическая внутренняя калибровка
- Единицы измерения: г, кг, унция, унция, гн, двт, мг
- Электромагнитный сбалансированный датчик
- Большой сенсорный дисплей
- Вывод данных



калибровочный груз класса F1 (в комплекте)



принтер (опция)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	8102-220	8102-320	8102-520	8102-620	8102-1020	8102-1520
Максимальное взвешивание	220 г	320 г	520 г	620 г	1020 г	1520 г
Минимальное взвешивание	20 мг	20 мг	100 мг	100 мг	100 мг	100 мг
Разрешение (d)	1 мг	1 мг	1 мг	1 мг	1 мг	1 мг
Межповерочный интервал (e)	10 мг	10 мг	10 мг	10 мг	10 мг	10 мг
Точность (m - нагрузка)	m≤50 г: ±5 мг 50 г<m≤200 г: ±10 мг m>200 г: ±15 мг		m≤500 г: ±5 мг; m>500 г: ±10 мг			
Размер лотка для взвешивания (Ød)	Ø80 мм				Ø120 мм	
Рабочая температура	15~30°C		18~23°C			
Рабочая влажность	40%~80% RH		50%~70% RH			
Источник питания	220 В, 50/60 Гц					
Размеры (L×W×H)	330×210×340 мм					

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

Основной блок	1 шт
Калибровочный груз	1 шт
Принадлежности для измерения плотности	1 установить

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Кабель RS232	8301-CABLE*
Принтер	8303-PRINTER
Кабель для вывода данных (формат клавиатуры)	7302-8001 стр. 23
Беспроводной передатчик (необходим приемник сигнала)	7315-8301 стр. 8
Инфракрасный и проникающий термометр	0321-IT42

* Используется для подключения к компьютеру



аксессуары для плотности (в комплекте)



- Подходит для измерения плотности твердых веществ и жидкостей
- Прозрачное стеклянное лобовое стекло, дно с нижними крючками для взвешивания
- Взвешивание, подсчет, тарирование, отображение процентов
- Единицы измерения: кг, унция, г, фунт
- Электромагнитный датчик
- ЖК-дисплей с подсветкой
- Высокоточные и чувствительные датчики температуры и влажности снижают влияние влажности окружающей среды и чувствительность к изменениям температуры
- Разделенные блок дисплея и весовой блок, уменьшают погрешность от вибрации
- Вывод данных

калибровочный груз
класса F1 (в комплекте)

принтер (опция)

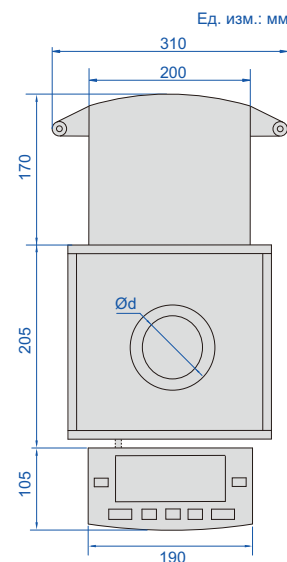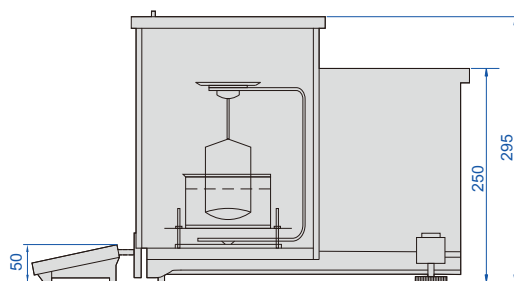

8103-120

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	8103-120	8103-210
Максимальное взвешивание	120 г	210 г
Минимальное взвешивание	10 мг	10 мг
Разрешение (d)	0.1 мг	0.1 мг
Межповерочный интервал (e)	1 мг	1 мг
Точность (m - нагрузка)	m ≤ 50 г: ±0.5 мг m > 50 г: ±1 мг	m ≤ 50 г: ±0.5 мг 50 г < m ≤ 200 г: ±1 мг m > 200 г: ±1.5 мг
Вес образца	>10 г	
Размер лотка для взвешивания (Ød)	Ø90 мм	
Повторяемость	±0.1 мг	
Линейность	±0.2 мг	
Время стабилизации	2.5 с	
Рабочая температура	13~25°C	
Рабочая влажность	40~80% RH	
Выход	RS232	
Источник питания	адаптер питания (12 В/2 А)	
Размеры (L×W×H)	480×310×320 мм	

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

Основной блок	1 шт
Калибровочный груз	1 шт
Принадлежности для измерения плотности	1 установить

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Кабель RS232	8304-CABLE*
Принтер	8303-PRINTER
Инфракрасный и проникающий термометр	0321-IT42

*Используется для подключения к компьютеру

НЕ МАГНИТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ

ВЫВОД
ДАННЫХ

37





8106-30KG



принтер (опция)

- Автоматическая калибровка, отслеживание нуля, взвешивание, подсчет, тарирование
- Основание из алюминиевого сплава, деревянный поддон
- Вывод данных
- Датчик тензометрических весов
- Единицы измерения: кг, фунт

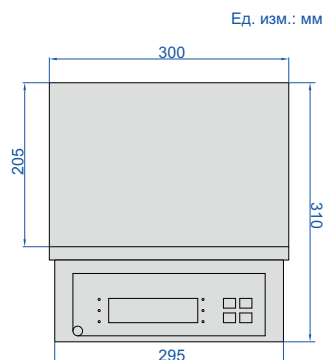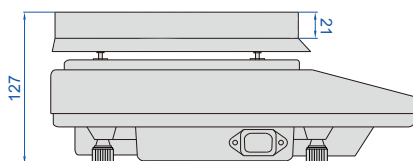

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	8106-3KG	8106-6KG	8106-10KG	8106-20KG	8106-30KG
Максимальное взвешивание	3 кг	6 кг	10 кг	20 кг	30 кг
Минимальное взвешивание	2 г	2 г	20 г	20 г	20 г
Разрешение (d)	0.1 г	0.1 г	1 г	1 г	1 г
Межповерочный интервал (e)	1 г	1 г	10 г	10 г	10 г
Точность (m - нагрузка)	m≤500 г: ±0.5 г; 500 г<m≤2 кг: ±1 г m>2 кг: ±1.5 г		m≤5 кг: ±5 г; m>5 кг: ±10 г		m≤5 кг: ±5 г; 5 кг<m≤20 кг: ±10 г m>20 кг: ±15 г
Рабочая температура	0~40°C				
Рабочая влажность	≤80%RH				
Источник питания	220 В, 50/60 Гц				
Размеры поддона	205×300 мм				

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Кабель RS232	8301-CABLE*
Принтер	8303-PRINTER
Кабель для вывода данных (формат клавиатуры)	7302-8001 стр. 23
Беспроводной передатчик (необходим приемник сигнала)	7315-8301 стр. 8

* Используется для подключения к компьютеру



ВЫВОД
ДАННЫХ

АНАЛИЗАТОРЫ ВЛАЖНОСТИ

37



калибровочный груз
(в комплекте)



8701-RM40

- ЖК-экран
- Высокочувствительный датчик температуры и влажности
- Кольцевая галогенная лампа нагревается равномерно, сокращает время сушки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	8701-RM20	8701-RM30	8701-RM40
Максимальное взвешивание	120 г	120 г	120 г
Разрешение (d)	5 мг	1 мг	0.1 мг
Точность для влажности	образец < 10 г	±10%	±0.5%
	образец ≥ 10 г	±5%	±0.3%
Рабочая температура	13~25°C		
Межповерочный интервал	2.5 с		
Время разминки	20~30 минут		
Размер лотка для взвешивания	Ø90 мм		
Источник нагрева	галогенная лампа (450 Вт)		
Диапазон температуры нагрева	60~200°C		
Настройка времени нагрева	0~99 минут		
Режим нагрева	стандартный нагрев, ступенчатый нагрев, быстрый нагрев		
Режим отключения	автоматическое отключение, ручное отключение, отключение по таймеру		
Выход	RS232C		
Источник питания	220 В, 50/60 Гц		
Размеры (L×W×H)	330×210×340 мм		

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

Основной блок	1 шт
Грузов	1 шт


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Кабель RS232	8304-CABLE *
Принтер	8303-PRINTER

* Используется для подключения к компьютеру

ВЕСЫ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ (СЕРТИФИКАТ OIML)

- ЖК-дисплей с подсветкой
- Установка нуля, вычитание массы тары
- Сигнализация перегрузки
- Автоматическое отключение
- OIML сертификат (No. 0200-NAWI-04601)

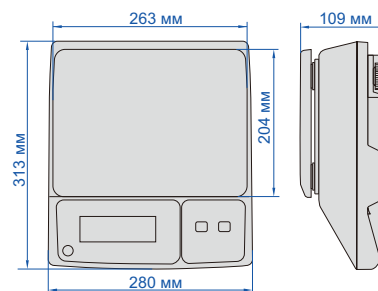

8002-30M

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	8002-6M	8002-15M	8002-30M	8002-6MD	8002-15MD	8002-30MD
Максимальное взвешивание	3/6 кг	6/15 кг	15/30 кг	3/6 кг	6/15 кг	15/30 кг
Минимальная емкость	20 г	40 г	100 г	20 г	40 г	100 г
Разрешение (d)	1/2 г	2/5 г	5/10 г	1/2 г	2/5 г	5/10 г
Межповерочный интервал (e)	2 г	5 г	10 г	2 г	5 г	10 г
Точность (m - нагрузка)	m≤3 кг: ±1 г 3 кг<m≤6 кг: ±2 г	m≤6 кг: ±2 г 6 кг<m≤15 кг: ±5 г	m≤15 кг: ±5 г 15 кг<m≤30 кг: ±10 г	m≤3 кг: ±1 г 3 кг<m≤6 кг: ±2 г	m≤6 кг: ±2 г 6 кг<m≤15 кг: ±5 г	m≤15 кг: ±5 г 15 кг<m≤30 кг: ±10 г
Выход	не			RS232		
Рабочая температура	-10~40°C					
Питание	аккумуляторная батарея (6 В/3.2 Ач), адаптер питания (12 В/500 мА)					
Размеры поддона	263×204 мм					

ВЕСЫ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ (ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ)


- ЖК-дисплей с подсветкой
- Установка нуля, вычитание массы тары
- Сигнализация перегрузки
- Автоматическое отключение



принтер (опция)



8001-30

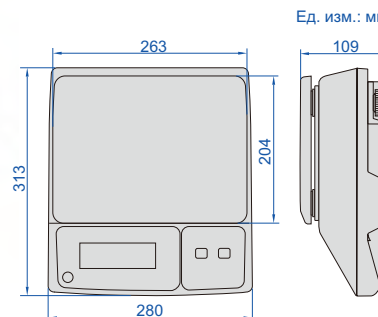

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	8001-6	8001-15	8001-30	8001-6D	8001-15D	8001-30D
Максимальное взвешивание	6 кг	15 кг	30 кг	6 кг	15 кг	30 кг
Минимальное взвешивание	4 г	10 г	20 г	4 г	10 г	20 г
Разрешение (d)	0.2 г	0.5 г	1 г	0.2 г	0.5 г	1 г
Точность (m - нагрузка)	m≤1 кг: ±1 г 1 кг<m≤4 кг: ±2 г m>4 кг: ±3 г	m≤2.5 кг: ±2.5 г 2.5 кг<m≤10 кг: ±5 г m>10 кг: ±7.5 г	m≤5 кг: ±5 г 5 кг<m≤20 кг: ±10 г m>20 кг: ±15 г	m≤1 кг: ±1 г 1 кг<m≤4 кг: ±2 г m>4 кг: ±3 г	m≤2.5 кг: ±2.5 г 2.5 кг<m≤10 кг: ±5 г m>10 кг: ±7.5 г	m≤5 кг: ±5 г 5 кг<m≤20 кг: ±10 г m>20 кг: ±15 г
Ед.изм.	кг, фунт			кг		
Выход	не			RS232		
Рабочая температура	-10~40°C					
Питание	аккумуляторная батарея (6 В/3.2 Ач)					
Размеры поддона	263×204 мм					

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (для весов с RS232)

Принтер	8001-PRINTER
Кабель для вывода данных (формат клавиатуры)	7302-8001 стр. 23
Беспроводной передатчик (необходим приемник сигнала)	7315-8001 стр. 8

СЧЕТНЫЕ ВЕСЫ




принтер (опция)

- ЖК-дисплей с подсветкой
- Установка нуля, вычитание массы тары, подсчет, накопление, проверка сигнала тревоги
- Сигнал перегрузки
- Ед. изм.: кг, г, фунт, tj, hj, фунт-унция



8101-30

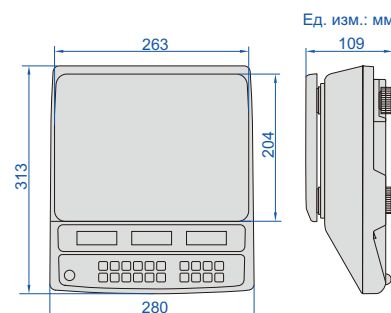

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	8101-6	8101-15	8101-30	8101-6D	8101-15D	8101-30D
Максимальное взвешивание	6 кг	15 кг	30 кг	6 кг	15 кг	30 кг
Минимальное взвешивание	4 г	10 г	20 г	4 г	10 г	20 г
Разрешение (d)	0.2 г	0.5 г	1 г	0.2 г	0.5 г	1 г
Точность (m - нагрузка)	m≤1 кг: ±1 г 1 кг<m≤4 кг: ±2 г m>4 кг: ±3 г	m≤2.5 кг: ±2.5 г 2.5 кг<m≤10 кг: ±5 г m>10 кг: ±7.5 г	m≤5 кг: ±5 г 5 кг<m≤20 кг: ±10 г m>20 кг: ±15 г	m≤1 кг: ±1 г 1 кг<m≤4 кг: ±2 г m>4 кг: ±3 г	m≤2.5 кг: ±2.5 г 2.5 кг<m≤10 кг: ±5 г m>10 кг: ±7.5 г	m≤5 кг: ±5 г 5 кг<m≤20 кг: ±10 г m>20 кг: ±15 г
Выход	не			RS232		
Рабочая температура	-10~40°C					
Питание	аккумуляторная батарея (6 В/3.2 Ач), адаптер питания (12 В/500 мА)					
Размеры поддона	263×204 мм					

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (для весов с RS232)

Принтер	8001-PRINTER
---------	--------------

ВЕСЫ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ (ЭКОНОМИЧНЫЙ ТИП)

- Ед. изм.: г, унция, фунт, tl



8003-3

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	8003-3	8003-6	8003-10
Максимальное взвешивание	3 кг	6 кг	10 кг
Минимальное взвешивание	2 г	10 г	20 г
Разрешение (d)	0.1 г	0.5 г	1 г
Точность	±0.5 г	±2.5 г	±5 г
Размер лотка для взвешивания	157×157 мм		
Рабочая температура	5~35°C		
Источник питания	2 батарейки типа AAA, адаптер питания		
Размеры (L×W)	160×225 мм		

ЭЛЕКТРОННЫЕ КАРМАННЫЕ ВЕСЫ (ЭКОНОМИЧНЫЙ ТИП)

ВНИМАНИЕ:
НИЗКАЯ ТОЧНОСТЬ

37

- ЖК-дисплей с подсветкой
- Установка нуля, вычитание массы тары, подсчет,
- Сигнализация перегрузки
- Автоматическое отключение



8601-100

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	8601-100
Максимальное взвешивание	100 г
Минимальное взвешивание	0.1 г
Разрешение (d)	0.01 г
Точность (m - нагрузка)	0.1 г ≤ m ≤ 1 г: ±0.03 г; 1 г < m ≤ 30 г: ±0.05 г 30 г < m ≤ 50 г: ±0.07 г; m > 50 г: ±0.14 г
Ед.изм.	г, унции, пеннивейт, тройская унция
Размеры поддона	55×64 мм
Размеры (L×W×H)	108×65×21 мм
Рабочая температура	-10~40°C
Источник питания	батареи 2×AAA

использование поддона



ЭЛЕКТРОННЫЕ КАРМАННЫЕ ВЕСЫ (ЭКОНОМИЧНЫЙ ТИП)

ВНИМАНИЕ:
НИЗКАЯ ТОЧНОСТЬ

- ЖК-дисплей с подсветкой
- Установка нуля, вычитание массы тары, подсчет,
- Сигнализация перегрузки
- Автоматическое отключение



8602-200

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	8602-200
Максимальное взвешивание	200 г
Минимальное взвешивание	0.2 г
Разрешение (d)	0.02 г
Точность (m - нагрузка)	0.2 г ≤ m ≤ 2 г: ±0.06 г; 2 г < m ≤ 60 г: ±0.1 г 60 г < m ≤ 100 г: ±0.14 г; m > 100 г: ±0.28 г
Ед.изм.	г, унции, пеннивейт, тройская унция
Размеры поддона	55×64 мм
Размеры (L×W×H)	120×70×17 мм
Рабочая температура	-10~40°C
Источник питания	батареи 2×CR2032

использование поддона



ВЫВОД
ДАННЫХМОЖЕТ БЫТЬ
НАСТРОЕН

ПЛАТФОРМЕННЫЕ ВЕСЫ

37




8501-AL150



принтер (опция)

- ЖК-дисплей с большим экраном и светодиодной подсветкой
- Взвешивание, сигнализация о превышении веса, подсчет, блокировка клавиатуры, накопление, автоматическое обнуление и весы для животных
- Ед. изм.: кг, г, фунт, унция

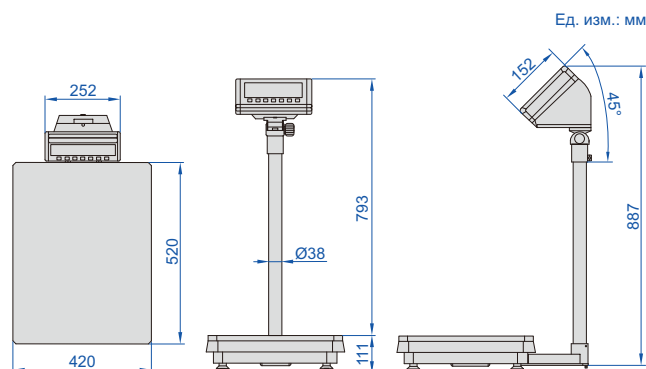

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	8501-AL60	8501-AL150	8501-AL300
Максимальное взвешивание	60 кг	150 кг	300 кг
Минимальное взвешивание	100 г	200 г	400 г
Разрешение (d)	5 г	10 г	20 г
Точность	±10 г	±20 г	±30 г
Рабочая температура	-10~40°C		
Материал	платформа: нержавеющая сталь, основание: литой под давлением алюминий		
Размеры платформы	420×520 мм		
Питание	перезаряжаемая свинцово-кислотная батарея (6 В/4 Ач)		
Выход	RS232		
Масса	18.3 кг		


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Принтер	8001-PRINTER
Кабель для вывода данных (формат клавиатуры)	7302-8001 стр. 23
Беспроводной передатчик (необходим приемник сигнала)	7315-8001 стр. 8

ПЛАТФОРМЕННЫЕ ВЕСЫ



8502-30

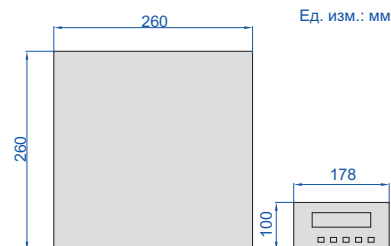

Ед. изм.: мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Чугунные грузы	8913
----------------	------

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Код	8502-30	8502-50	8502-60	8502-75
Максимальное взвешивание	30 кг	50 кг	60 кг	75 кг
Минимальное взвешивание	2 г	20 г	20 г	20 г
Разрешение (d)	m≤3 кг: 0.1 г; 3 кг<m≤30 кг: 1 г	1 г	1 г	1 г
Точность (m - нагрузка)	m≤3 кг: ±0.3 г; 3 кг<m≤30 кг: ±3 г	±3 г	±3 г	±3 г
Вес калибровки	20 кг	50 кг	50 кг	50 кг
Размер лотка для взвешивания	260×260 мм			
Материал	платформа: АБС-пластик, основание: литой под давлением алюминий			
Температура эксплуатации	5~35°C			
Эксплуатационная влажность	30%~80%RH			
Электропитание	адаптер питания (6 В/300 мА) или 4×1.5 В батарейки АА			

- Взвешивание, подсчет, вычитание значения тары
- Светодиодный дисплей, регулируемая яркость
- Индикация низкого напряжения
- Автоматическое отключение питания
- Индикация перегрузки
- Единицы измерения: кг, фунт

ПЛАТФОРМЕННЫЕ ВЕСЫ



8503-30

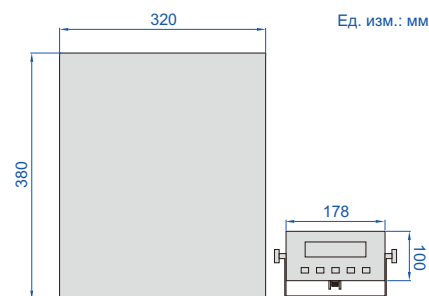

Ед. изм.: мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Чугунные грузы	8913
----------------	------


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	8503-30	8503-60	8503-120	8503-200
Максимальное взвешивание	30 кг	60 кг	120 кг	200 кг
Минимальное взвешивание	20 г	100 г	200 г	400 г
Разрешение (d)	1 г	5 г	10 г	20 г
Точность	±3 г	±15 г	±30 г	±60 г
Вес калибровки	20 кг	50 кг	100 кг	200 кг
Размер лотка для взвешивания	320×380 мм			
Материал	платформа: нержавеющая сталь, основание: литой под давлением алюминий			
Температура эксплуатации	5~35°C			
Эксплуатационная влажность	30%~80%RH			
Электропитание	адаптер питания (6 В/300 мА) или 4×1.5 В батарейки АА			


- Взвешивание, подсчет, вычитание стоимости тары
- ЖК-дисплей с подсветкой
- Индикация перегрузки
- Автоматическое отключение питания
- Индикация низкого напряжения
- Единицы измерения: кг, фунт

ВЫВОД
ДАННЫХ

НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ

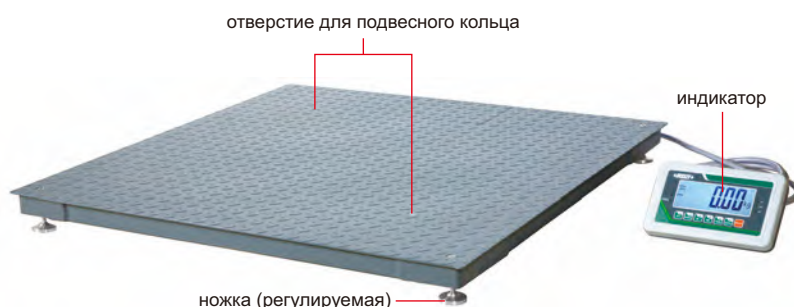


8401-1T1212

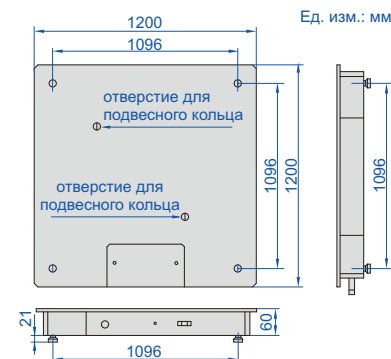

Ед. изм.: мм


37

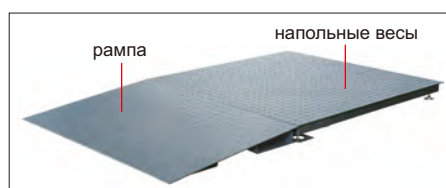

рампа (опция)



принтер (опция)

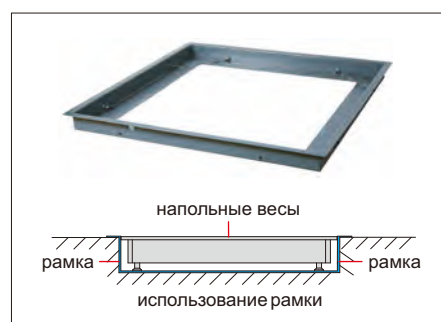

рама (опция)



подставка (опция)

- ЖК-дисплей с большим экраном и автоматической подсветкой
- Ноль, сигнализация о избыточном весе, вычет, преобразование единиц измерения, накопление, весы для животных и т.д.
- Ед. изм.: кг, г, фунт, унция
- Тензодатчик, одобренный OIML

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	8401-1T1212	8401-2T1212	8401-3T1212
Максимальное взвешивание	1t	2t	3t
Минимальное взвешивание	10 кг	20 кг	20 кг
Разрешение (d)	0.5 кг	1 кг	1 кг
Межповерочный интервал (e)	0.5 кг	1 кг	1 кг
Точность (m - нагрузка)	$m \leq 250 \text{ кг: } \pm 0.25 \text{ кг;}$ $250 \text{ кг} < m \leq 1000 \text{ кг: } \pm 0.5 \text{ кг;}$ $m \leq 500 \text{ кг: } \pm 0.5 \text{ кг;}$ $500 \text{ кг} < m \leq 2000 \text{ кг: } \pm 1 \text{ кг;}$ $m > 2000 \text{ кг: } \pm 1.5 \text{ кг}$		
Тензодатчик	4 шт 350 Ом		
Рабочая температура	-10~40°C		
Материал	мягкая сталь		
Размеры платформы	1200×1200 мм		
Питание	перезаряжаемая свинцово-кислотная батарея (6 В/4 Ач)		
Выход	RS232		
Масса	140 кг		

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

Основной блок	1 шт
Индикатор	1 шт
Адаптер переменного/постоянного тока	1 шт
Ножка из нержавеющей стали	4 шт
Подвесное кольцо	2 шт

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Рампа	8401-1212-1
Кадр	8401-1212-2
Подставка	8401-STAND
Принтер	8001-PRINTER

ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК С ВЕСАМИ


37



светодиодный индикатор

8801-A20

- Установка нуля, вычитание значения тары, подсчет, контрольное взвешивание
- Автоматическое отключение экрана и питания
- Индикация низкого напряжения и перегрузки
- Удержание веса, суммирование веса, процентное отображение
- Светодиодный большой экран
- Единицы измерения: кг, фунт

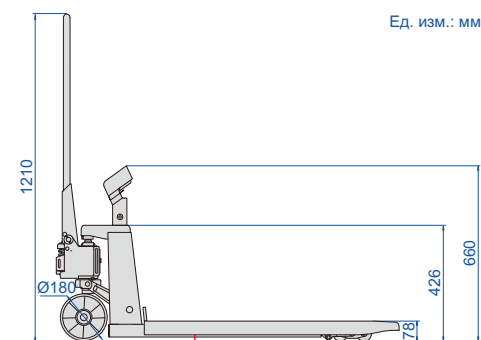


Ед. изм.: мм



максимальная
высота
подъема



диаметр задних колес

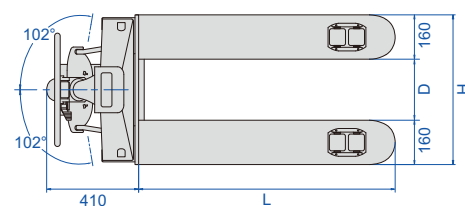

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Код	8801-A15	8801-A20	8801-A25	8801-B15	8801-B20	8801-B25
Максимальное взвешивание	1500 кг	2000 кг	2500 кг	1500 кг	2000 кг	2500 кг
Минимальное взвешивание	10 кг	20 кг	20 кг	10 кг	20 кг	20 кг
Разрешение (d)	0.5 кг	1 кг	1 кг	0.5 кг	1 кг	1 кг
Точность	±1 кг	±1 кг	±2 кг	±1 кг	±1 кг	±2 кг
Длина стрелы вилочного погрузчика (L)	1150 мм			1220 мм		
Расстояние между стрелами вилочного погрузчика (D)	220 мм			360 мм		
Общая ширина вилочного погрузчика (H)	540 мм			680 мм		
Масса	98 кг			105 кг		
Материал	низкоуглеродистая сталь					
Источник питания индикатора	перезаряжаемая свинцово-кислотная батарея (6 В/4 Ач)					
Температура эксплуатации	-10~50°C					
Эксплуатационная влажность	30%~90%RH					
Ограниченная нагрузка	2500 кг	3000 кг	3000 кг	2500 кг	3000 кг	3000 кг

IP65

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ

- Уровень пыле-/влагозащиты: IP65
- Светодиодный дисплей, дистанционное управление
- Индикатор низкого напряжения
- Ед. изм.: кг, фунт
- Автоматическое отключение
- Сигнализация перегрузки
- Безопасный поворотный на 360° крюк и скоба
- Корпус отлит под давлением из алюминиевого сплава высокой прочности

ЭЛЕКТРОННЫЕ КРАНОВЫЕ ВЕСЫ ПРЯМОГО ОБЗОРА

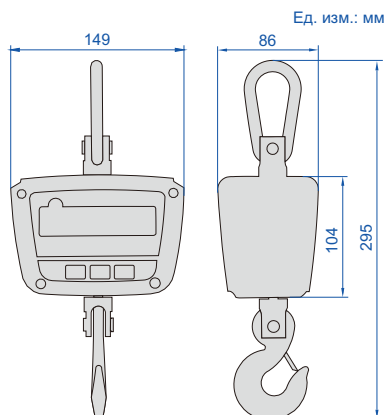

8201-150KG



дистанционное управление
(в комплекте)

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Код	8201-50KG	8201-150KG	8201-300KG
Максимальное взвешивание	50 кг	150 кг	300 кг
Минимальное взвешивание	0.4 кг	1.0 кг	2.0 кг
Разрешение (d)	0.02 кг/0.01 кг	0.05 кг/0.02 кг	0.10 кг/0.05 кг
Межповерочный интервал (e)	0.02 кг	0.05 кг	0.10 кг
Точность	±0.02 кг	±0.05 кг	±0.10 кг
Рабочая температура	-10~40°C		
Рабочая влажность	30%~90%RH		
Сигнализация перегрузки	100%F.S.+9e		
Максимальная безопасная нагрузка	125%F.S.		
Ограниченная перегрузка	400%F.S.		
Источник питания	аккумулятор 6 В/3 Ач (на 40 часов работы)		
Стабильное время считывания	≤8 с		

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

Основной блок	1 шт
Дистанционное управление	1 шт
Зарядное устройство для батарей	1 шт

ЭЛЕКТРОННЫЕ КРАНОВЫЕ ВЕСЫ ПРЯМОГО ОБЗОРА (БАЗОВЫЙ ТИП)

- Светодиодный дисплей, дистанционное управление
- Индикатор низкого напряжения
- Ед. изм.: кг, фунт
- Автоматическое отключение
- Сигнализация перегрузки
- Безопасный поворотный на 360° крюк и скоба
- Пластиковый корпус

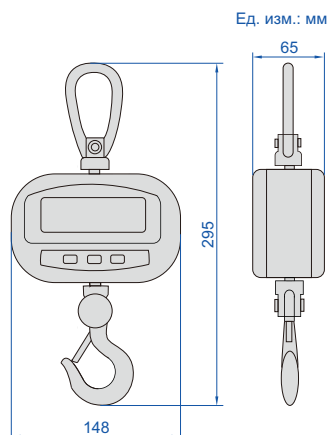

8202-150KG



дистанционное управление
(в комплекте)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	8202-50KG	8202-150KG	8202-300KG
Максимальное взвешивание	50 кг	150 кг	300 кг
Минимальное взвешивание	0.4 кг	1.0 кг	2.0 кг
Разрешение (d)	0.02 кг/0.01 кг	0.05 кг/0.02 кг	0.10 кг/0.05 кг
Межповерочный интервал (e)	0.02 кг	0.05 кг	0.10 кг
Точность	±0.02 кг	±0.05 кг	±0.10 кг
Рабочая температура	-10~40°C		
Рабочая влажность	30%~90%RH		
Сигнализация перегрузки	100%F.S.+9e		
Максимальная безопасная нагрузка	125%F.S.		
Ограниченная перегрузка	400%F.S.		
Источник питания	батареи 4×1.5 В AA (на 40 часов работы)		
Стабильное время считывания	≤8 с		

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

Основной блок	1 шт
Дистанционное управление	1 шт

ЭЛЕКТРОННЫЕ КРАНОВЫЕ ВЕСЫ

37

- Обнуление, тарирование, взвешивание
- Светодиодный дисплей, дистанционное управление
- Индикатор низкого напряжения
- Ед. изм.: кг, фунт
- Автоматическое отключение
- Сигнализация перегрузки
- Корпус отлит под давлением из алюминиевого сплава высокой прочности

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

Основной блок	1 шт
Дистанционное управление	1 шт
Зарядное устройство для батарей	1 шт



дистанционное управление
(в комплекте)



8204-CS3T



портативный дисплей
(опция)



большой дисплей (опция)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	8204-CS06T	8204-CS1T	8204-CS2T	8204-CS3T
Максимальное взвешивание	600 кг	1000 кг	2000 кг	3000 кг
Минимальное взвешивание	5 кг	10 кг	20 кг	30 кг
Разрешение (d)	0.2 кг/0.1 кг	0.5 кг/0.2 кг	1 кг/0.5 кг	1 кг/0.5 кг
Межповерочный интервал (e)	0.2 кг	0.5 кг	1 кг	1 кг
Точность (m - нагрузка)	m≤100 кг: ±0.1 кг; 50 кг<m≤200 кг: ±0.2 кг; m>200 кг: ±0.3 кг	m≤250 кг: ±0.25 кг; 250 кг<m≤1000 кг: ±0.5 кг	m≤500 кг: ±0.5 кг; 500 кг<m≤2000 кг: ±1 кг	m≤500 кг: ±0.5 кг; 500 кг<m≤2000 кг: ±1 кг; m>2000 кг: ±1.5 кг
Сигнализация перегрузки	100%F.S.+9e			
Максимальная безопасная нагрузка	150%F.S.			
Ограниченная перегрузка	400%F.S.			
Стабильное время считывания	≤8 с			
Источник питания	аккумулятор 6 В/4 Ач (на 40 часов работы)			
Рабочая температура	-10~40°C			
Рабочая влажность	≤85%RH			


Код	8204-CS5T	8204-CS10T	8204-CS15T
Максимальное взвешивание	5000 кг	10000 кг	15000 кг
Минимальное взвешивание	50 кг	100 кг	100 кг
Разрешение (d)	2 кг/1 кг	5 кг/2 кг	5 кг/2 кг
Межповерочный интервал (e)	2 кг	5 кг	5 кг
Точность (m - нагрузка)	m≤1000 кг: ±1 кг; 1000 кг<m≤4000 кг: ±2 кг; m>4000 кг: ±3 кг	m≤2500 кг: ±2.5 кг; 2500 кг<m≤10000 кг: ±5 кг	m≤2500 кг: ±2.5 кг; 2500 кг<m≤10000 кг: ±5 кг; m>10000 кг: ±7.5 кг
Сигнализация перегрузки	100%F.S.+9e		
Максимальная безопасная нагрузка	150%F.S.		
Ограниченная перегрузка	400%F.S.		
Стабильное время считывания	≤8 с		
Источник питания	аккумулятор 6 В/4 Ач (на 40 часов работы)		
Рабочая температура	-10~40°C		
Рабочая влажность	≤85%RH		

Продолжение следует

Продолжение предыдущей страницы

Код	B	G	H	L	L1	L2	D1	ØD2	Ød	ØF
8204-CS06T	120	163	198	420	190	33	40	47	21	76
8204-CS1T	120	163	198	420	190	33	40	47	21	76
8204-CS2T	120	163	198	420	190	33	50	47	21	76
8204-CS3T	120	163	198	462	196	40	50	50	23	76
8204-CS5T	120	163	198	511	204	47	52	60	26	80
8204-CS10T	135	181	206	589	239	66	52	70	36	90
8204-CS15T	135	181	206	727	257	77	60	85	47	135

(мм)

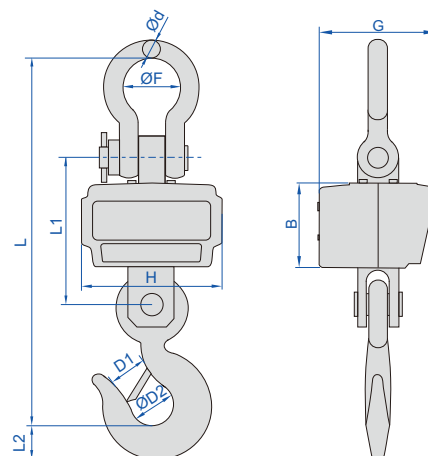

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Ручной дисплей	8204-INDICATOR (должны поставляться вместе с весами)
Большой дисплей	8204-SCREEN (должны поставляться вместе с весами)

ЭЛЕКТРОННЫЕ КРАНОВЫЕ ВЕСЫ (БАЗОВЫЙ ТИП)

Ед. изм.: мм


- Обнуление, тарирование, взвешивание
- Светодиодный дисплей, дистанционное управление
- Индикатор низкого напряжения
- Ед. изм.: кг, фунт
- Автоматическое отключение
- Сигнализация перегрузки
- Корпус отлит под давлением из алюминиевого сплава высокой прочности



8203-CW05T



дистанционное управление
(в комплекте)

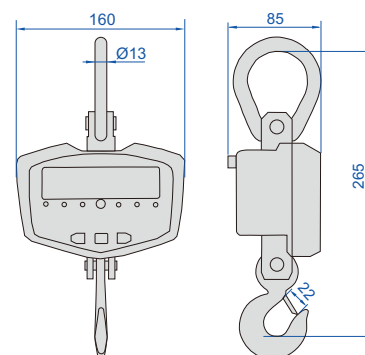

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	8203-CW03T	8203-CW05T	8203-CW1T
Максимальное взвешивание	300 кг	500 кг	1000 кг
Минимальное взвешивание	2 кг	4 кг	10 кг
Разрешение (d)	0.1 кг/0.05 кг	0.2 кг/0.1 кг	0.5 кг/0.2 кг
Межповерочный интервал (e)	0.1 кг	0.2 кг	0.5 кг
Точность (m - нагрузка)	m≤50 кг: ±0.05 кг; 50 кг<m≤200 кг: ±0.1 кг; m>200 кг: ±0.15 кг	m≤100 кг: ±0.1 кг; 100 кг<m≤400 кг: ±0.2 кг; m>400 кг: ±0.3 кг	m≤250 кг: ±0.25 кг; 250 кг<m≤1000 кг: ±0.5 кг
Сигнализация перегрузки	100%F.S.+9e		
Максимальная безопасная нагрузка	150%F.S.		
Ограниченная перегрузка	400%F.S.		
Стабильное время считывания	<8 с		
Источник питания	батареи 3×1.5 В AA		
Рабочая температура	-10~40°C		
Рабочая влажность	30%~90%RH		

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

Основной блок	1 шт
Дистанционное управление	1 шт

БЕСПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КРАНОВЫЕ ВЕСЫ

IP65
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ


37



дистанционное управление
(в комплекте)



8205-3T

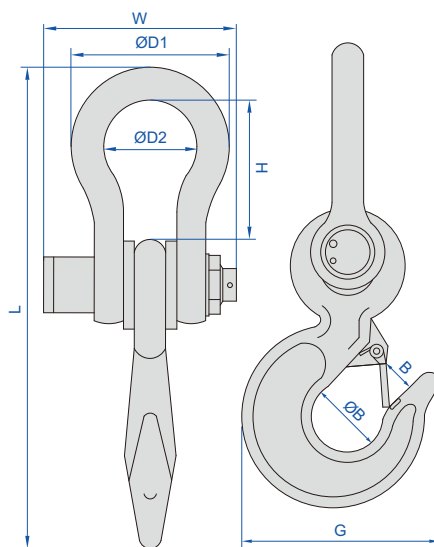

большой дисплей (опция)



беспроводной принтер
(опция)



беспроводной приемник
(опция)

- Беспроводная установка нуля, вычитание значения тары, суммирование
- Дистанционное считывание
- Расстояние беспроводной передачи данных до 100 метров
- Индикация низкого напряжения, сигнализация перегрузки
- Единицы измерения: кг, фунт
- Автоматическое отключение питания

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

Основной блок	1 шт
Дистанционное управление	1 шт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сигнализация перегрузки	100%F.S.+9e
Максимальная безопасная нагрузка	150%F.S.
Ограниченная перегрузка	400%F.S.
Стабильное время считывания	≤8 с
Источник питания	аккумуляторная батарея 4.2 В/1 А (на 40 часов работы)
Рабочая температура	-10~40°C
Рабочая влажность	≤85%RH

Код	L	H	ØD1	ØD2	W	G	B	ØB
8205-2T	319	88	132	72	198	126	34	48
8205-3T	319	88	132	72	198	126	34	48
8205-5T	407	105	160	88	219	161	42	57
8205-10T	465	105	170	95	246	202	46	65
8205-15T	520	130	215	120	263	203	60	77
8205-20T	621	135	251	142	294	284	75	105
8205-30T	770	205	325	180	356	305	85	125
8205-50T	1020	340	360	200	436	470	135	170

Код	8205-2T	8205-3T	8205-5T	8205-10T
Максимальное взвешивание	2t	3t	5t	10t
Минимальное взвешивание	10 кг	20 кг	40 кг	100 кг
Разрешение (d)	1 кг/0.5 кг	1 кг/0.5 кг	2 кг/1 кг	5 кг
Точность (m - нагрузка)	m≤0.5t: ±0.5 кг; m>0.5t: ±1 кг	m≤0.5t: ±0.5 кг; 0.5t<m≤2t: ±1 кг; m>2t: ±1.5 кг	m≤1t: ±1 кг; 1t<m≤4t: ±2 кг; m>4t: ±3 кг	m≤2.5t: ±2.5 кг; m>2.5t: ±5 кг

Код	8205-15T	8205-20T	8205-30T	8205-50T
Максимальное взвешивание	15t	20t	30t	50t
Минимальное взвешивание	100 кг	200 кг	200 кг	400 кг
Разрешение (d)	5 кг	10 кг	10 кг	20 кг
Точность (m - нагрузка)	m≤2.5t: ±2.5 кг; 2.5t<m≤10t: ±5 кг; m>10t: ±7.5 кг	m≤5t: ±5 кг; m>5t: ±10 кг	m≤5t: ±5 кг; 5t<m≤20t: ±10 кг; m>20t: ±15 кг	m≤10t: ±10 кг; 10t<m≤40t: ±20 кг; m>40t: ±30 кг

Продолжение следует

Продолжение предыдущей страницы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Беспроводной принтер	8205-PRINTER (должны поставляться вместе с весами)
Большой дисплей	8205-SCREEN (должны поставляться вместе с весами)
Беспроводной приемник (сигнал последовательного порта, подключение к компьютерам)	8205-RECEIVER (должны поставляться вместе с весами)

37

МОЖЕТ БЫТЬ
НАСТРОЕН

ПОДВЕСНЫЕ ВЕСЫ



кольца для подвешивания
весов (опция)


- Единицы измерения: кг, Н
- Светодиодный дисплей, дистанционное управление
- Обнуление, тарирование, взвешивание, суммирование
- Пиковый (макс.) и следящий режим
- Индикатор низкого напряжения
- Встроенный зуммер
- Автоматическое отключение питания
- Сигнал тревоги при перегрузке



8206-3T



дистанционное
управление
(в комплекте)

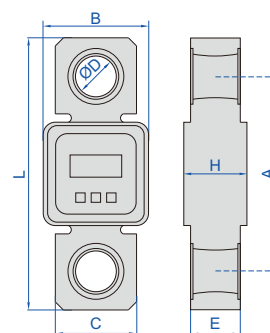

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура эксплуатации	-10~55°C
Эксплуатационная влажность	≤85%RH
Материал	легированная сталь
Источник питания	3×1.5V AA батареи
Стабильное время считывания	≤8 с
Ограниченная перегрузка	300%FS
Максимальная безопасная нагрузка	150%FS
Сигнализация перегрузки	100%FS+9e

Код	Размер (мм)						
	L	B	C	H	E	A	ØD
8206-05T	204	99	46	50	30	158	26
8206-1T	204	99	46	50	30	158	26
8206-2T	204	99	46	50	30	158	26
8206-3T	204	99	46	54	30	158	26
8206-5T	222	99	60	58	35	162	31
8206-10T	268	104	80	62	49	192	41
8206-15T	304	110	92	66	58	212	46.5
8206-20T	344	120	120	66	66	232	56.5
8206-30T	394	132	132	73	73	264	66
8206-50T	500	150	150	100	100	340	80

Код	Максимальная вес		Минимальный вес		Разрешение (d)		Интервал верификации (e)	Точность		Масса
	значения массы	значения усилия	значения массы	значения усилия	значения массы	значения усилия		значения массы	значения усилия	
8206-05T	0.5t	5 кН	4 кг	40 Н	0.2 кг/0.1 кг	2 Н/1 Н	0.2 кг	±0.2 кг	±1%	1.6 кг
8206-1T	1t	10 кН	10 кг	100 Н	0.5 кг/0.2 кг	5 Н/2 Н	0.5 кг	±0.5 кг		2 кг
8206-2T	2t	20 кН	20 кг	200 Н	1 кг/0.5 кг	10 Н/5 Н	1 кг	±1 кг		2.1 кг
8206-3T	3t	30 кН	20 кг	200 Н	1 кг/0.5 кг	10 Н/5 Н	1 кг	±1.5 кг		2.3 кг
8206-5T	5t	50 кН	40 кг	400 Н	2 кг/1 кг	20 Н/10 Н	2 кг	±2 кг		3.6 кг
8206-10T	10t	100 кН	100 кг	1 кН	5 кг/2 кг	50 Н/20 Н	5 кг	±5 кг		6.2 кг
8206-15T	15t	150 кН	100 кг	1 кН	5 кг/2 кг	50 Н/20 Н	5 кг	±7.5 кг		9.5 кг
8206-20T	20t	200 кН	200 кг	2 кН	10 кг/5 кг	100 Н/50 Н	10 кг	±10 кг		15 кг
8206-30T	30t	300 кН	200 кг	2 кН	10 кг/5 кг	100 Н/50 Н	10 кг	±15 кг		21.9 кг
8206-50T	50t	500 кН	400 кг	4 кН	20 кг/10 кг	200 Н/100 Н	20 кг	±20 кг		45.5 кг

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

Основной блок	1 шт
Дистанционное управление	1 шт

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Кольца для подвешивания весов	стр. 1266
-------------------------------	-----------

БЕСПРОВОДНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ВЕСЫ

МОЖЕТ БЫТЬ
НАСТРОЕН

37




кольца для подвешивания
весов (опция)



8207-3T



ЖК-пульт дистанционного
управления (в комплекте)

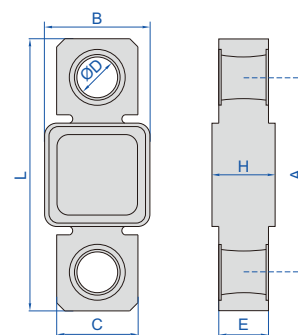

- Единицы измерения: кг, Н
- Ручной ЖК-дисплей, пульт дистанционного управления
- Беспроводная установка нуля, вычитание значения тары, суммирование
- Пиковый (макс.) и следящий режим
- Расстояние беспроводной передачи данных до 100 метров
- Индикатор низкого напряжения
- Встроенный зуммер
- Автоматическое отключение питания
- Сигнал тревоги при перегрузке

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура эксплуатации	-10~55°C
Эксплуатационная влажность	≤85%RH
Материал	легированная сталь
Источник питания	3×1.5V AA батареи
Стабильное время считывания	≤8 с
Ограниченная перегрузка	300%FS
Максимальная безопасная нагрузка	150%FS
Сигнализация перегрузки	100%FS+9e

Код	Размер (мм)						
	L	B	C	H	E	A	ØD
8207-05T	204	99	46	50	30	158	26
8207-1T	204	99	46	50	30	158	26
8207-2T	204	99	46	50	30	158	26
8207-3T	204	99	46	54	30	158	26
8207-5T	222	99	60	58	35	162	31
8207-10T	268	104	80	62	49	192	41
8207-15T	304	110	92	66	58	212	46.5
8207-20T	344	120	120	66	66	232	56.5
8207-30T	394	132	132	73	73	264	66
8207-50T	500	150	150	100	100	340	80

Код	Максимальная вес		Минимальный вес		Разрешение (d)		Интервал верификации (e)	Точность		Масса
	значения массы	значения усилия	значения массы	значения усилия	значения массы	значения усилия		значения массы	значения усилия	
8207-05T	0.5t	5 кН	4 кг	40 Н	0.2 кг/0.1 кг	2 Н/1 Н	0.2 кг	±0.2 кг	±1%	1.6 кг
8207-1T	1t	10 кН	10 кг	100 Н	0.5 кг/0.2 кг	5 Н/2 Н	0.5 кг	±0.5 кг		2 кг
8207-2T	2t	20 кН	20 кг	200 Н	1 кг/0.5 кг	10 Н/5 Н	1 кг	±1 кг		2.1 кг
8207-3T	3t	30 кН	20 кг	200 Н	1 кг/0.5 кг	10 Н/5 Н	1 кг	±1.5 кг		2.3 кг
8207-5T	5t	50 кН	40 кг	400 Н	2 кг/1 кг	20 Н/10 Н	2 кг	±2 кг		3.6 кг
8207-10T	10t	100 кН	100 кг	1 кН	5 кг/2 кг	50 Н/20 Н	5 кг	±5 кг		6.2 кг
8207-15T	15t	150 кН	100кг	1 кН	5 кг/2 кг	50 Н/20 Н	5 кг	±7.5 кг		9.5 кг
8207-20T	20t	200 кН	200 кг	2 кН	10 кг/5 кг	100 Н/50 Н	10 кг	±10 кг		15 кг
8207-30T	30t	300 кН	200кг	2 кН	10 кг/5 кг	100 Н/50 Н	10 кг	±15 кг		21.9 кг
8207-50T	50t	500 кН	400 кг	4 кН	20 кг/10 кг	200 Н/100 Н	20 кг	±20 кг		45.5 кг


СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

Основной блок	1 шт
ЖК-пульт дистанционного управления	1 шт

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Кольца для подвешивания весов	стр. 1266
-------------------------------	-----------

КОЛЬЦА ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ ВЕСОВ

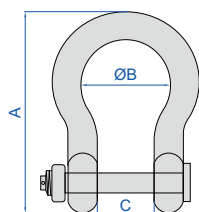

приложение



8290-1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Материал	Размер (мм)			Адаптированные продукты
		A	ØB	C	
8290-1	легированная сталь	76	169	107	8207-05T, 8207-1T, 8207-2T, 8207-3T, 8206-05T, 8206-1T, 8206-2T, 8206-3T
8290-2		80	192	122	8206-5T, 8207-5T
8290-3		90	241	145	8206-10T, 8207-10T
8290-4		135	318	202	8206-15T, 8207-15T
8290-5		150	355	220	8206-20T, 8207-20T
8290-6		150	448	279	8206-30T, 8207-30T
8290-7		214	504	313	8206-50T, 8207-50T

- Используется с весами серии **8206** и подвесными весами серии **8207**

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

Основной блок 1 пара

ПОРТАТИВНЫЕ ВЕСЫ (БЕЗМЕН) КОД 8604-40

- Установка нуля, вычитание значения тары
- Автоматическое отключение питания
- ЖК-дисплей с подсветкой
- Единицы измерения: кг
- Индикация перегрузки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное взвешивание	40 кг
Минимальное взвешивание	1 кг
Разрешение (d)	50 г
Точность	±50 г
Рабочая температура	-10~45°C
Рабочая влажность	30~90%RH
Ограниченная перегрузка	50 кг
Источник питания	2×AAA батареи



ВНИМАНИЕ: НИЗКАЯ ТОЧНОСТЬ



встроенная измерительная лента (в комплекте)

ТРУБЧАТЫЕ СИЛОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ПОДРОБНЕЕ СМ. СТР. 1016



8603-100

ГРУЗЫ



37



1 кг 200 г 500 мг 200 мг 100 мг

■ Поставляются с сертификатом калибровки изготовителя

ВЫБОР КЛАССА

Разрешающая способность весов	Требуемый класс грузов
0.001 мг	E1
0.01 мг	E2
0.1 мг	E2/F1
1 мг	F2
0.01 г/0.1 г	M1

ДОПУСК OIML R111-2004

Масса	E2	F1	F2	M1
1 мг	0.006 мг	0.020 мг	0.06 мг	0.20 мг
2 мг	0.006 мг	0.020 мг	0.06 мг	0.20 мг
5 мг	0.006 мг	0.020 мг	0.06 мг	0.20 мг
10 мг	0.008 мг	0.025 мг	0.08 мг	0.25 мг
20 мг	0.010 мг	0.03 мг	0.10 мг	0.3 мг
50 мг	0.012 мг	0.04 мг	0.12 мг	0.4 мг
100 мг	0.016 мг	0.05 мг	0.16 мг	0.5 мг
200 мг	0.020 мг	0.06 мг	0.20 мг	0.6 мг
500 мг	0.025 мг	0.08 мг	0.25 мг	0.8 мг
1 г	0.03 мг	0.10 мг	0.3 мг	1.0 мг
2 г	0.04 мг	0.12 мг	0.4 мг	1.2 мг
5 г	0.05 мг	0.16 мг	0.5 мг	1.6 мг
10 г	0.06 мг	0.20 мг	0.6 мг	2.0 мг
20 г	0.08 мг	0.25 мг	0.8 мг	2.5 мг
50 г	0.10 мг	0.3 мг	1.0 мг	3.0 мг
100 г	0.16 мг	0.5 мг	1.6 мг	5.0 мг
200 г	0.3 мг	1.0 мг	3.0 мг	10 мг
500 г	0.8 мг	2.5 мг	8.0 мг	25 мг
1 кг	1.6 мг	5.0 мг	16 мг	50 мг
2 кг	3.0 мг	10 мг	30 мг	100 мг
5 кг	8.0 мг	25 мг	80 мг	250 мг
10 кг	16 мг	50 мг	160 мг	500 мг
20 кг	30 мг	100 мг	300 мг	1000 мг

Масса	Класс и материал						Форма
	E2 (немагнитная нержавеющая сталь)	F1 (немагнитная нержавеющая сталь)	F1 (304 нержавеющая сталь)	F2 (304 нержавеющая сталь)	M1 (304 нержавеющая сталь)	M1 (2Cr13 нержавеющая сталь)	
1 мг	8911-1MGE2	8911-1MGF1	8911-1MGF1S	8911-1MGF2	8911-1MGM1	8911-1MGM1C	пластинка
2 мг	8911-2MGE2	8911-2MGF1	8911-2MGF1S	8911-2MGF2	8911-2MGM1	8911-2MGM1C	
5 мг	8911-5MGE2	8911-5MGF1	8911-5MGF1S	8911-5MGF2	8911-5MGM1	8911-5MGM1C	
10 мг	8911-10MGE2	8911-10MGF1	8911-10MGF1S	8911-10MGF2	8911-10MGM1	8911-10MGM1C	
20 мг	8911-20MGE2	8911-20MGF1	8911-20MGF1S	8911-20MGF2	8911-20MGM1	8911-20MGM1C	
50 мг	8911-50MGE2	8911-50MGF1	8911-50MGF1S	8911-50MGF2	8911-50MGM1	8911-50MGM1C	
100 мг	8911-100MGE2	8911-100MGF1	8911-100MGF1S	8911-100MGF2	8911-100MGM1	8911-100MGM1C	
200 мг	8911-200MGE2	8911-200MGF1	8911-200MGF1S	8911-200MGF2	8911-200MGM1	8911-200MGM1C	цилиндр
500 мг	8911-500MGE2	8911-500MGF1	8911-500MGF1S	8911-500MGF2	8911-500MGM1	8911-500MGM1C	
1 г	8911-1GE2	8911-1GF1	8911-1GF1S	8911-1GF2	8911-1GM1	8911-1GM1C	
2 г	8911-2GE2	8911-2GF1	8911-2GF1S	8911-2GF2	8911-2GM1	8911-2GM1C	
5 г	8911-5GE2	8911-5GF1	8911-5GF1S	8911-5GF2	8911-5GM1	8911-5GM1C	
10 г	8911-10GE2	8911-10GF1	8911-10GF1S	8911-10GF2	8911-10GM1	8911-10GM1C	
20 г	8911-20GE2	8911-20GF1	8911-20GF1S	8911-20GF2	8911-20GM1	8911-20GM1C	
50 г	8911-50GE2	8911-50GF1	8911-50GF1S	8911-50GF2	8911-50GM1	8911-50GM1C	
100 г	8911-100GE2	8911-100GF1	8911-100GF1S	8911-100GF2	8911-100GM1	8911-100GM1C	
200 г	8911-200GE2	8911-200GF1	8911-200GF1S	8911-200GF2	8911-200GM1	8911-200GM1C	
500 г	8911-500GE2	8911-500GF1	8911-500GF1S	8911-500GF2	8911-500GM1	8911-500GM1C	
1 кг	8911-1KGE2	8911-1KGF1	8911-1KGF1S	8911-1KGF2	8911-1KGM1	8911-1KGM1C	
2 кг	8911-2KGE2	8911-2KGF1	8911-2KGF1S	8911-2KGF2	8911-2KGM1	8911-2KGM1C	
5 кг	8911-5KGE2	8911-5KGF1	8911-5KGF1S	8911-5KGF2	8911-5KGM1	8911-5KGM1C	
10 кг	8911-10KGE2	8911-10KGF1	8911-10KGF1S	8911-10KGF2	8911-10KGM1	8911-10KGM1C	
20 кг	8911-20KGE2	8911-20KGF1	8911-20KGF1S	8911-20KGF2	8911-20KGM1	8911-20KGM1C	
25 кг	8911-25KGE2	8911-25KGF1	8911-25KGF1S	8911-25KGF2	8911-25KGM1	8911-25KGM1C	

- Поставляются с сертификатом калибровки изготовителя



8910-5KGF1

КЛАСС И МАТЕРИАЛ

Характеристики	Код				
	E2 (немагнитная нержавеющая сталь)	F1 (немагнитная нержавеющая сталь)	F1 (304 нержавеющая сталь)	F2 (304 нержавеющая сталь)	M1 (304 нержавеющая сталь)
1 мг~100 г	8910-100GE2	8910-100GF1	8910-100GF1S	8910-100GF2	8910-100GM1
1 мг~200 г	8910-200GE2	8910-200GF1	8910-200GF1S	8910-200GF2	8910-200GM1
1 мг~500 г	8910-500GE2	8910-500GF1	8910-500GF1S	8910-500GF2	8910-500GM1
1 мг~1 кг	8910-1KGE2	8910-1KGF1	8910-1KGF1S	8910-1KGF2	8910-1KGM1
1 мг~2 кг	8910-2KGE2	8910-2KGF1	8910-2KGF1S	8910-2KGF2	8910-2KGM1
1 мг~5 кг	8910-5KGE2	8910-5KGF1	8910-5KGF1S	8910-5KGF2	8910-5KGM1

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФОРМА

Масса	Характеристики					
	1 мг~100 г	1 мг~200 г	1 мг~500 г	1 мг~1 кг	1 мг~2 кг	1 мг~5 кг
1 мг	■	■	■	■	■	■
2 мг	■ ■*	■ ■*	■ ■*	■ ■*	■ ■*	■ ■*
5 мг	■	■	■	■	■	■
10 мг	■	■	■	■	■	■
20 мг	■ ■*	■ ■*	■ ■*	■ ■*	■ ■*	■ ■*
50 мг	■	■	■	■	■	■
100 мг	■	■	■	■	■	■
200 мг	■ ■*	■ ■*	■ ■*	■ ■*	■ ■*	■ ■*
500 мг	■	■	■	■	■	■
1 г	■	■	■	■	■	■
2 г	■ ■*	■ ■*	■ ■*	■ ■*	■ ■*	■ ■*
5 г	■	■	■	■	■	■
10 г	■	■	■	■	■	■
20 г	■ ■*	■ ■*	■ ■*	■ ■*	■ ■*	■ ■*
50 г	■	■	■	■	■	■
100 г	■	■	■	■	■	■
200 г		■ ■*	■ ■*	■ ■*	■ ■*	■ ■*
500 г			■	■	■	■
1 кг				■	■	■
2 кг					■ ■*	■ ■*
5 кг						■
Количество	21 шт	23 шт	24 шт	25 шт	27 шт	28 шт
Общий диапазон	1 мг~211.11 г	1 мг~611.11 г	1 мг~1111.11 г	1 мг~2111.11 г	1 мг~6111.11 г	1 мг~11111.11 г

■ пластинка

■ цилиндр

■* пластинка с маркировкой

■* цилиндр с маркировкой

ЧУГУННЫЕ ГИРИ



- Поставляются с сертификатом калибровки изготовителя



8913-10M2

ДОПУСК OIML R111-2004

Масса	M1	M2
1 кг	50 мг	160 мг
2 кг	100 мг	300 мг
5 кг	250 мг	800 мг
10 кг	500 мг	1600 мг
20 кг	1000 мг	3000 мг
50 кг	2500 мг	8000 мг
100 кг	5000 мг	16000 мг
200 кг	10000 мг	30000 мг
500 кг	25000 мг	80000 мг
1000 кг	50000 мг	160000 мг

ВЫБОР КЛАССА

Разрешающая способность весов	Требуемый класс весов
0.01 г/0.1 г	M1
0.1 г	M2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса	Класс	
	M1	M2
1 кг	8913-1M1	8913-1M2
2 кг	8913-2M1	8913-2M2
5 кг	8913-5M1	8913-5M2
10 кг	8913-10M1	8913-10M2
20 кг	8913-20M1	8913-20M2
25 кг	8913-25M1	8913-25M2
50 кг	8913-50M1	8913-50M2
100 кг	8913-100M1	8913-100M2
200 кг	8913-200M1	8913-200M2
500 кг	8913-500M1	8913-500M2
1000 кг	8913-1000M1	8913-1000M2

ЧУГУННЫЕ ГИРИ



- Поставляются с сертификатом калибровки изготовителя



8912-10KM1



алюминиевая коробка
(в комплекте)

ДОПУСК OIML R111-2004

Масса	F1	F2	M1
500 г	2.5 мг	8.0 мг	25 мг
1 кг	5.0 мг	16 мг	50 мг
2 кг	10 мг	30 мг	100 мг
5 кг	25 мг	80 мг	250 мг
10 кг	50 мг	160 мг	500 мг
20 кг	100 мг	300 мг	1000 мг

ВЫБОР КЛАССА

Разрешающая способность весов	Требуемый класс весов
0.1 мг	F1
1 мг	F2
0.01 г/0.1 г	M1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса	Класс		
	F1	F2	M1
500 г	8912-500F1	8912-500F2	8912-500M1
1 кг	8912-1KF1	8912-1KF2	8912-1KM1
2 кг	8912-2KF1	8912-2KF2	8912-2KM1
5 кг	8912-5KF1	8912-5KF2	8912-5KM1
10 кг	8912-10KF1	8912-10KF2	8912-10KM1
15 кг	8912-15KF1	8912-15KF2	8912-15KM1
20 кг	8912-20KF1	8912-20KF2	8912-20KM1
25 кг	8912-25KF1	8912-25KF2	8912-25KM1

ВНИМАНИЕ: ГРАВИТАЦИОННОЕ УСКОРЕНИЕ
G СИЛЬНЫХ ВЕСОВ ПРИНЯТО ЗА 9.8 м/с²

МОЖЕТ БЫТЬ
НАСТРОЕН

СЕРТИФИКАТ
КАЛИБРОВКИ

ГРУЗЫ С ОДНИМ КРЮЧКОМ

ВЕСЫ С ОДИНАРНЫМ КРЮЧКОМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССЫ

Масса	Класс и материал		
	F1 (304 нержавеющая сталь)	F2 (304 нержавеющая сталь)	M1 (2Cr13 нержавеющая сталь)
1 г	8914-1GF1	8914-1GF2	8914-1GM1
2 г	8914-2GF1	8914-2GF2	8914-2GM1
5 г	8914-5GF1	8914-5GF2	8914-5GM1
10 г	8914-10GF1	8914-10GF2	8914-10GM1
20 г	8914-20GF1	8914-20GF2	8914-20GM1
50 г	8914-50GF1	8914-50GF2	8914-50GM1
100 г	8914-100GF1	8914-100GF2	8914-100GM1
200 г	8914-200GF1	8914-200GF2	8914-200GM1
500 г	8914-500GF1	8914-500GF2	8914-500GM1
1 кг	8914-1KGF1	8914-1KGF2	8914-1KGM1
2 кг	8914-2KGF1	8914-2KGF2	8914-2KGM1
5 кг	8914-5KGF1	8914-5KGF2	8914-5KGM1
10 кг	8914-10KGF1	8914-10KGF2	8914-10KGM1
15 кг	8914-15KGF1	8914-15KGF2	8914-15KGM1
20 кг	8914-20KGF1	8914-20KGF2	8914-20KGM1

ВЕСА КРЮЧКОВ ДЛЯ ЗНАЧЕНИЙ СИЛЫ

Масса	Класс и материал		
	F1 (304 нержавеющая сталь)	F2 (304 нержавеющая сталь)	M1 (2Cr13 нержавеющая сталь)
1 Н	8914-1NF1	8914-1NF2	8914-1NM1
2 Н	8914-2NF1	8914-2NF2	8914-2NM1
5 Н	8914-5NF1	8914-5NF2	8914-5NM1
10 Н	8914-10NF1	8914-10NF2	8914-10NM1
20 Н	8914-20NF1	8914-20NF2	8914-20NM1
50 Н	8914-50NF1	8914-50NF2	8914-50NM1
100 Н	8914-100NF1	8914-100NF2	8914-100NM1
200 Н	8914-200NF1	8914-200NF2	8914-200NM1



8914-1KF2



8914-2KF2

- Поставляются с сертификатом калибровки изготовителя

ДОПУСК OIML R111-2004

Масса	F1	F2	M1
1 г	0.10 мг	0.3 мг	1.0 мг
2 г	0.12 мг	0.4 мг	1.2 мг
5 г	0.16 мг	0.5 мг	1.6 мг
10 г	0.20 мг	0.6 мг	2.0 мг
20 г	0.25 мг	0.8 мг	2.5 мг
50 г	0.3 мг	1.0 мг	3.0 мг
100 г	0.5 мг	1.6 мг	5.0 мг
200 г	1.0 мг	3.0 мг	10 мг
500 г	2.5 мг	8.0 мг	25 мг
1 кг	5.0 мг	16 мг	50 мг
2 кг	10 мг	30 мг	100 мг
5 кг	25 мг	80 мг	250 мг
10 кг	50 мг	160 мг	500 мг
20 кг	100 мг	300 мг	1000 мг

ВЫБОР КЛАССА

Разрешение весовые приборы	Требуемый класс весов
0.1 мг	F1
1 мг	F2
0.01 г/0.1 г	M1

- Подходит для резки круглых образцов шерстяных, хлопчатобумажных, трикотажных тканей и т.д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Площадь	100 см ²
Толщина	4 мм
Лезвие	4 шт
Материал	алюминий
Мат	резиновый коврик
Размер (L×W×H)	160×160×115 мм
Масса	2 кг



РЕЗАК ГНКМ (ГРАММ НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР) КОД 8390-100